



H



Hygiëne is een
voorwaarde sine
qua non in de
dentale praktijk.
Cavex levert
daarvoor effectieve
en efficiënte
hulpmiddelen die
mens en milieu niet
schaden. Afgestemd
op de eisen
van tandartsen,
specialisten,
assistentes en
tandtechnici.
Your impression is
our concern.

Eindelijk de intelligente oplossing om alginaatresten snel en gemakkelijk te verwijderen: Cavex GreenClean.

Wie kan een betere alginaatoplosser maken, dan de makers van alginaat zelf? Cavex GreenClean is het bewijs. De meest effectieve manier om alginaat- en gipsresten te verwijderen, is door ze op te lossen, niet door ze af te krabben of te schuren. Afdruklepels, spatels en andere instrumenten snel en gemakkelijk weer schoon en gaaf.

Op een vriendelijke wijze, Cavex GreenClean spaart zowel de instrumenten als de huid. Dat mag met recht een intelligente oplossing heten.



Cavex Holland BV
P.O. Box 852
2003 RW Haarlem
The Netherlands



Cavex Holland BV
P.O. Box 852
2003 RW Haarlem
The Netherlands

T +31 23 530 77 00
F +31 23 535 64 82
dental@cavex.nl
www.cavex.nl

Het geheim van Cavex GreenClean: de afbraak van de organische matrix.

- **pH neutraal**
- **huidvriendelijk**
- **biologisch afbreekbaar**
- **1 kg > 500 schone lepels**
- **frisse geur**

Zoals vaker het geval, is de oplossing voor de hardnekkige, vaak lastig te verwijderen alginaat- en gipsresten eenvoudiger dan gedacht. We hoeven alleen de organische matrix af te breken en het geheel valt uit elkaar. Afspoelen met water, of even borstelen, en een schone, glanzende en gave lepel is weer klaar voor gebruik.

Met spatels en andere instrumenten die met alginaat in aanraking komen, werkt het net zo effectief en gemakkelijk.


Twee schepjes Cavex GreenClean in een halve liter water. Loszittende alginaatresten verwijderen en de instrumenten 15 tot 30 minuten onderdompelen. Afspoelen of -borstelen. Klaar. Nooit meer krabben, nooit meer schuren. Gebruikt u warm water, of een ultrasoon bad, dan gaat het nog sneller.

pH Neutraal, biologisch afbreekbaar. Da's prettig voor materiaal, mens en milieu.

Cavex GreenClean heeft alleen effect op de alginaat- of gipsresten. Niet op de lepels of spatels zelf, die gaaf en onaantast blijven. En, wel zo belangrijk, ook niet op de huid. Het is pH neutraal en biologisch afbreekbaar, dus de resten kunnen zonder probleem door de gootsteen. Het enige wat achterblijft is een frisse, lichte citroengeur.

De transparante pot met maatschepje bevat 1 kg Cavex GreenClean, voldoende om meer dan 500 lepels te reinigen. Niet alleen effectief, maar ook economisch!

Cavex GreenClean wordt geleverd door uw dental depot. Voor nadere informatie over productsamenstelling en -toepassingen kunt u contact opnemen met Cavex, +31 23 530 77 00 of www.cavex.nl

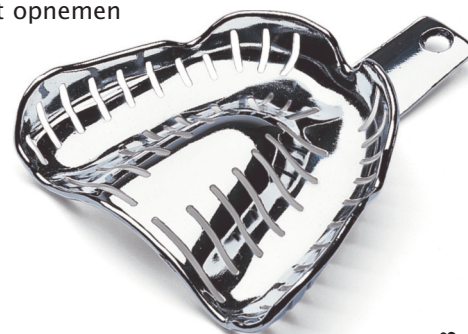

CAVEX YOUR IMPRESSION IS OUR CONCERN