

Aanbevolen door professionals

Cavex Bite&White is een product van Cavex Holland, een gespecialiseerde fabrikant van tandartsproducten met meer dan 100 jaar ervaring. Cavex Bite&White Professional Dental Whitening System is uitvoerig getest en wordt aanbevolen door tandartsen en mondhygiënist. Cavex Bite&White bevat 16% carbamideperoxide, een materiaal dat zich als tandbleekmiddel heeft bewezen. Het is effectief zonder uw tanden aan te tasten.

Fluoride

Cavex Bite&White bevat natriumfluoride voor het versterken van het glazuur. Het bevat ook kaliumnitraat dat helpt tegen gevoeligheid.

Mint is toegevoegd voor een aangename smaak in het geval er een beetje materiaal uit de mal komt.

Om mond- of gezondheidsproblemen uit te sluiten en om Cavex Bite&White te kunnen gebruiken, is een consult bij een bevoegde tandarts of mondhygiënist voor de bleekbehandeling noodzakelijk. Alle Cavex Bite&White bleekmaterialen zijn pH-neutraal (pH = 6,2) en derhalve veilig voor uw tanden.

Naast de patient kit is er ook een refill beschikbaar, goed voor ca. tien keer bleken.



Meer informatie

Uw tandarts kan u meer vertellen over Cavex Bite&White.

CAVEX BITE&WHITE

Gevoelige tanden?

NIEUW! Cavex Bite&White ExSense T a n d - c o n d i t i o n e r

Cavex Bite&White ExSense is een tand-conditioner voor thuis gebruik die **gevoeligheid van tanden wegneemt** en nieuwe gevoeligheid helpt voorkomen. Maakt het tandoppervlak glad en glanzend waardoor ze witter lijken.

Cavex Bite&White ExSense is ook ideaal om te gebruiken na het bleken van uw tanden. De conditioner neemt eventuele gevoeligheid weg en **helpt uw tanden snel te herstellen.**

Vraag uw tandarts of Cavex Bite&White ExSense ook iets voor u is.



CAVEX
Bite&White
Professional Dental Whitening System

Cavex Holland BV
Fustweg 5
2031 CJ Haarlem
www.cavex.nl

OOK EEN STRALEND WITTE LACH?

Thuis
bleken onder
toezicht van
uw tandarts

pH-neutraal,
dus veilig voor
uw tanden!



CAVEX
Bite&White
Professional Dental Whitening System

Bleek uw tanden thuis met Cavex Bite&White. Veilig, effectief en gemakkelijk!

Stralend witte tanden

Mooie witte tanden zijn aantrekkelijk om te zien. Om jaloers op te worden! Het hebben van witte tanden is bovendien goed voor het zelfvertrouwen. Weet u dat het tegenwoordig heel eenvoudig is om uw tanden te bleken? Er is nu Cavex Bite&White, een veilig product om uw tanden thuis te bleken. Cavex Bite&White werkt snel, is gemakkelijk in gebruik en laat u weer stralend lachen!

Veilig en effectief tanden bleken

De meeste mensen beginnen hun leven met een smetteloos wit gebit. Door koffie, thee en andere voedingsmiddelen verkleuren tanden na verloop van tijd. Bovendien kunnen het gebruik van medicijnen of erfelijke tandproblemen een rol spelen. En hoe vervelend het ook klinkt, ook ouder worden heeft invloed op de tandkleur. Het beschermende glazuur van uw tanden wordt dunner, zodat kleurstoffen nog sneller kunnen doordringen en waardoor het onderliggende, relatief donkere, tandbeen meer zichtbaar wordt.

Een voor de hand liggende oplossing is tanden bleken. Daarvoor is Cavex Bite&White ontwikkeld. Een veilig en effectief tandbleekmiddel. De behandeling vindt niet plaats in een kliniek of in de tandartsstoel. U voert hem zelf uit; waar en wanneer u het wilt. Ook uw tanden kunnen zo mooi wit worden als die van die ander waar u altijd zo jaloers op was.*

* Resultaat is ondermeer afhankelijk van de aard van de verkleuring, de intensiteit, de algehele mondhygiëne en behandelduur.

Raadpleeg uw tandarts

Alleen een tandheelkundige behandelaar mag Cavex Bite&White aan u verstrekken. Het is verstandig voordat u gaat bleken contact op te nemen met uw tandarts. Deze kan u goed voorlichten over de mogelijkheden van het bleken van uw tanden, u nuttige tips geven én belangrijk voorbereidend werk doen. Zoals uw gebit controleren, polijsten en ontdoen van tandsteen. Uw tandarts kan goed de huidige kleur vaststellen en op basis van uw wensen een nieuwe kleur bepalen. Die kleur is vervolgens weer de basis voor het bleekschema.



Voor de behandeling.



Na de behandeling een stralend witte lach.

Veilig aan de slag met de goed passende mal

Aan de hand van een professionele afdruk van uw gebit wordt een goed passende mal gemaakt. Die past precies om uw tanden en kiezen. Hierdoor zal de bleekgel niet of nauwelijks in contact komen met uw tandvlees.


De bleekgel kan plaatselijk wat irritatie of overgevoeligheid veroorzaken. Uw tandarts geeft precies aan hoeveel gel u moet gebruiken.



U krijgt de transparante gebitsmal(len) en bleekgel mee naar huis.

Thuis verder bleken

Door eerst een specialist te raadplegen en die het voorwerk te laten doen, is voor u het risico minimaal en het resultaat maximaal. U kunt thuis verder gaan met bleken. Met de meegeleverde kleurstrip waarop de beginkleur wordt aangegeven kunt u goed de bereikte resultaten vergelijken.

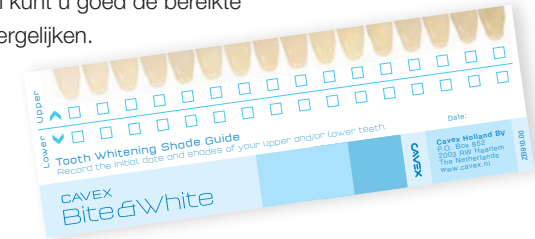

Hoe vaak moet u uw tanden bleken?

Het bleekschema bepaalt u in overleg met uw tandarts. Cavex Bite&White levert de beste resultaten als u gedurende ongeveer tien dagen achtereen minimaal een uur per dag bleekt. U kunt bleken wanneer het u uitkomt!



**Aanbevolen door
tandartsen en
mondhygiënist**

Voor een optimaal resultaat wordt vooraf uw gebit gecontroleerd, eventueel ontdaan van tandsteen en gepolijst.